



000/0020.130/30

## Silwo, siliconen schuimverband

Silwo, superabsorberende pleisters met zachte siliconen wondcontactlaag, behoren tot het MExT sensitive productgamma. Geschikt voor exsuderende wonden. Silwo pleisters voelen comfortabel en zacht aan. Aangenaam draagcomfort.



### Eigenschappen

- Afmetingen: 8.5x5cm (rechthoekig), 7.5x5cm (ovaal).
- Huidkleurige pleisters met geavanceerde vijfslagige structuur:
  1. Zachte siliconen wondcontactlaag: voorkomt geïrriteerde huid,
  2. Superabsorberende laag uit polyacrylaatvezel,
  3. Non woven absorptielaag,
  4. Laag uit polyurethaanschuim: Zacht en dik schuimkompres. Groot absorptievermogen; beschermt tegen schokken.
  5. Dampdoorlatende en waterbestendige polyurethaanfilmlaag: laat de huid ademen; vormt een barrière tegen bacteriën.


- Siliconencontactlaag: gunstige invloed op littekenvorming; pijnloos te verwijderen; geen huidbeschadiging; goede fixatie.
- Pleister is herpositioneerbaar, kan meermaals opnieuw aangebracht worden.
- Pleisters zijn individueel en steriel verpakt.

## Toepassingen

- Breed scala aan exsuderende wonden zoals doorligwonden, been- en voetzweren, traumatische wonden, chirurgische wonden en huidscheurtjes.
- Geschikt voor gevoelige huid.
- Eenmalig gebruik.

## Gebruik

- Ontsmet de wond.
- Verwijder de schutbladen en breng aan op droge, propere huid.
- Vervang regelmatig.

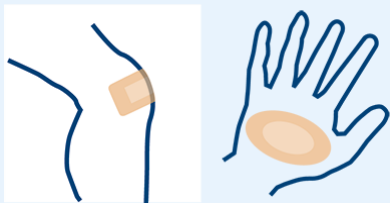

## Inhoud

- Doos 2x6 stuks
- Bijsluiter

## Bewaring

- Bewaren tussen 5°C en 40°C.
- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.

Silwo is een medisch hulpmiddel.

**Versie: 17/05/2024**